4.1 Onrustband (type rolband) aanbrengen



Onrustand met vast kruisstuk.

Het gebruik van het kruisstuk is verplicht bij gebruik van de onrustband.

Afbeelding 1

De oude onrustbanden hebben nog een los kruisstuk, wat bevestigd moet worden aan de onrustband. Let op de juiste maat van het kruisstuk.
Houdt het kruisstuk met de afbeelding met "FACE UP " naar boven en schuif de lus van het losse kruisstuk over de beide delen van de onrustband heen.



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Zorg dat het kruisstuk in het midden uitkomt.



Afbeelding 4

Leg de onrustband op het matras met de twee lussen richting het voeteneind.
Bij voorkeur met 2 personen vastmaken zodat de band goed strak getrokken kan worden aan het bed.



Afbeelding 5

Schuif de bevestigingsband door één van beide VBI beugeltjes onder het bedframe.

Afhankelijk van de grootte van de patiënt kan het ook door de VBI beugel aan de bovenkant van het bedframe,

Zet het bedhek even omhoog om beter bij de beugeltjes te kunnen. Trek de band goed naar beneden zodat deze strak aan het bed en op het matras komt te zitten.



Afbeelding 6

Haal de bevestigingsband nu omhoog, houdt goed strak en zet de bevestigingsband vast met een slotje. Zorg dat het slotje aan de zijkant van het bed zit zodat de patiënt de armen niet beschadigd. Zorg dat de onrustband in het midden op het bed ligt.



Afbeelding 7

Onrustband bevestigd aan bed.



Afbeelding 8

Bevestig de onrustband **goed strak** om de buik (bij voorkeur met 2 personen) en zet vast met een slotje.
De band moet tussen de bekkenkam en de ribbenboog zitten, alleen dan kan de band goed strak vastgezet worden.

Let op, tijdens het fixeren zal de patiënt (on)bewust de buik aanspannen waardoor de onrustband losser kan komen te zitten dan moet. Daarom eerste controle altijd na 15 minuten.
Belangrijk dat de band goed strak zit.



Afbeelding 9

Bevestig het kruisstuk met het slotje aan de onrustband Let op dat het kruisstuk niet te strak zit, maar ook niet te los waardoor de patiënt alsnog naar beneden zakt of met de benen erdoorheen kan.



Afbeelding 10

Maak aan beide kanten de laterale banden vast aan de bevestigingsband met het reeds aangebrachte slotje (of een extra slotje). Geef de patiënt meer bewegingsruimte voor bijvoorbeeld wissel ligging door de laterale banden wat losser vast te zetten. Onrustband die goed strak zit om de buik is veilig en houdt de patiënt in bed, niet de laterale banden.

4.2 Polsband(en) aanbrengen



Afbeelding 11

Leg de polsband iets onder de knokkel van de pols.



Afbeelding 12

Sluit de polsband met de 3 klitteband stroken. Dit moet strak, maar nog wel een voelbare polsslag behouden.



Afbeelding 13

Zet de polsband extra vast met het riempje aan de bovenzijde. (sommige polsbanden hebben een ringsluiting).

Let op: Indien de patiënt een erg dunne polsomvang en/of een smalle hand heeft bestaat het gevaar dat deze de hand door de polsband kan bevrijden. Als extra zekerheid kan de polsband dan worden gecombineerd met het aantrekken van een veiligheidshandschoen. Zie Veiligheidshandschoen, het gebruik bij volwassenen.



Afbeelding 14

Bevestig de polsband aan de VBI-beugel met een slotje. Afhankelijk van de situatie kan ook een andere VBI-opening in het bed worden gebruikt.



Afbeelding 15

Zorg dat de hand niet teveel naar de bedrand getrokken wordt. Gevaar dat de hand naast het matras glijdt met dikke hand of beklemming als gevolg.
Leg eventueel een handdoek of klein kussentje onder de hand.



Afbeelding 16


De bevestigingsband is soms te lang waardoor het op de grond hangt, met gevaar voor struikelen.



Afbeelding17

Stop het loshangende deel van de bevestigingsband onder het matras als deze te lang is.

4.3 Enkelbanden aanbrengen

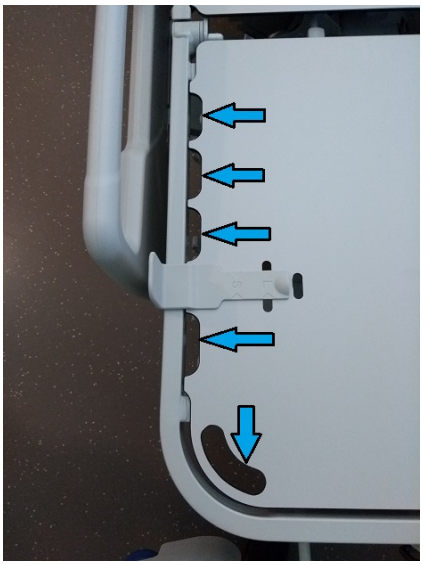


Afbeelding 18

De enkelband vastzetten aan een van de VBI-openingen bij het voeteneind, afhankelijk van de lengte van de patiënt.
Bij bedverlenging kan alleen de laatste halfronde opening gebruikt worden.



Afbeelding 19

Indien de halfronde opening aan het einde van de bedbodem wordt gebruikt, zorg dat de band wordt bevestig om de ijzeren bedrand.

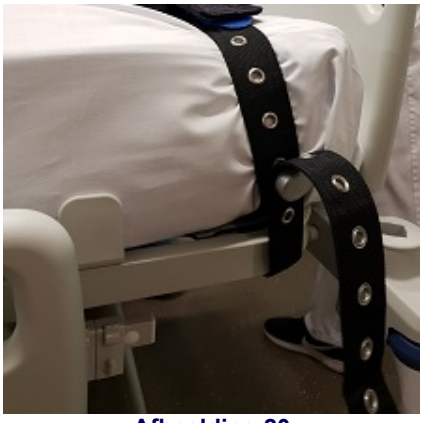

Afbeelding 20

Zet de enkelband aan beide zijden strak vast aan het bed met een slotje.
Let op dat de band goed strak om het matras zit zodat de band niet naar onderen eraf kan schuiven.
Zorg dat de bevestigingsbanden voor de enkel in het midden van het matras liggen.



Afbeelding 21

Leg de enkel zonder sokken net boven de knok op de enkelband.



Afbeelding 22

Maak beide enkels goed vast met de 3 klitteband stroken.



Sluit de kliksluiting en trek deze vast aan.
Controleer aanwezigheid pulsaties.

Afbeelding 23

Belangrijk:
Bij alle VBI in bed, altijd:

- **Bedhekken omhoog.**
- **Bed in de laagste stand.**

Oproepsysteem aan patiënt geven.
Verwijder banden die niet in gebruik zijn bij de patiënt direct uit bed.

4.4 Overig



Afbeelding 24

Veiligheidsmes dient op een vaste plaats op de afdeling bewaard te worden voor noodsituaties.

Let op: Buiten bereik van patiënt en bezoekers.

4.5 Afwijkende polsbanden / uitzonderingen

Onderstaande disposable polsbanden zijn uitsluitend te gebruiken in specifieke situaties / patiënten categorie. Disposable polsbanden zijn daarom niet te bestellen via de service portal.



Afbeelding 25

Doelgroep:
Voor kleine kinderen die niet in staat zijn om zelf de kliksluiting los te maken en niet erg onrustig/sterk zijn. De dikte van de pols is mede bepalend wanneer een kind van de "gewone" polsband veilig naar deze polsband kan overgaan. Is situatie gebonden.

Bij volwassenen alleen op de IC in gebruik, ter voorkoming van verwijderen medisch hulpmiddel. Alleen bij IC patiënten die niet onrustig zijn, niet sterk en niet zelf de kliksluiting kunnen openen.

Bevestiging:
Stevig bevestigen met klittenband rondom de pols en met een kliksluiting aan het bed.
Positie van bevestigen aan het bed zoals bij afbeelding 14.



Afbeelding 26

Doelgroep:
Foam polsbandjes voor baby's en heel kleine kinderen. Wanneer er overgegaan kan worden naar bovenstaande polsband is afhankelijk van de individuele situatie van het kindje.

Bevestiging:
De linten aan deze polsbandjes moeten met de quick release knoop aan het bed worden bevestigd. In bijlage de instructie voor de quick release knoop.

5 Bedhekken

- Het gebruik van alleen bedhekken om te voorkomen dat een patiënt uit bed valt/stapt is niet veilig.
- Bedhekken als VBI worden alleen toegepast in combinatie met pols/enkel/onrustband fixatie.
- Als de patiënt zelf de bedhekken omhoog wil voor comfort is dit geen VBI.
  Patiënt moet adequaat zijn om het gevaar van bedhekken in te zien en niet zelf over de hekken uit bed te stappen.
- Bij gebruik van bedhekken **altijd** het bed in de **laagste stand** zetten.
  Ter controle; dit is te zien wanneer het lampje onderaan het bed groen licht op de vloer schijnt. (oranje